


Inhalador presurizado con Aerocámara o Espaciador

Características:

Ayudan a mejorar la eficiencia en el uso de los inhaladores presurizados.

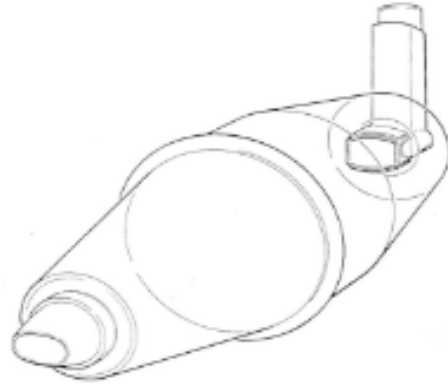

MODO DE USO CON ESPACIADOR

1. Posición sentada o de pie, espalda recta y cuello erguido.
2. Destapar y sujetar el inhalador con el índice arriba y el pulgar en la parte inferior (en forma de L).
3. Agitar enérgicamente.
4. Insertar el inhalador en el extremo del espaciador.
5. Exhalar suavemente y colocar la boquilla del espaciador en los labios.
6. Presionar el inhalador una sola vez.
7. Inspirar lento y profundo por la boca hasta el máximo posible.
8. Retirar el espaciador y mantener la respiración 10 segundos, luego exhalar.
9. Si requiere una segunda dosis esperar 30 segundos y repetir los pasos anteriores.
10. Enjuagar boca y garganta (gárgaras) con agua.
11. Guardar en lugar limpio y seguro.

Mantenimiento y limpieza:

- Los espaciadores deben lavarse una vez a la semana con agua templada y jabón sin olor. Para secarlas, se deben colocar sobre una superficie y dejar que se sequen solas a temperatura ambiente.
- No secar con toalla.
- Comprobar el estado de la cámara y de la válvula; desechar ésta si se observan fisuras o funcionamiento anormal.